

Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 15, 2025

Abstract

Ce travail a permis grâce à la DMA d'extraire les paramètres E' , E'' et $\tan \delta$ dont le pic caractéristique évolue en fonction de la fréquence appliquée à l'échantillon. Cette méthode nous a permis de trouver la valeur de ... pour l'énergie d'activation d'un échantillon de PMMA. Grâce à la DSC, nous avons déterminé les températures de cristallisation et de fusion dans différents régimes thermiques d'un échantillon de PET qui se trouvent chacune respectivement autour de ... °C et de ... °C.

Contents

1	Introduction	2
2	DMA	3
2.1	Description de l'installation et manipulations	3
2.2	Théorie	4
2.3	Résultats	5
2.4	Analyse des résultats, complément	6
3	DSC	7
3.1	Description des manipulations	7
3.2	Résultats	8
3.3	Analyse	9
4	Conclusion	10
5	Annexes	11
5.1	Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC	11

1 Introduction

Il existe plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1). Dans notre cas, c'est par la flexion que nous analysons un echantillon de PMMA pour une premiere exeperience.

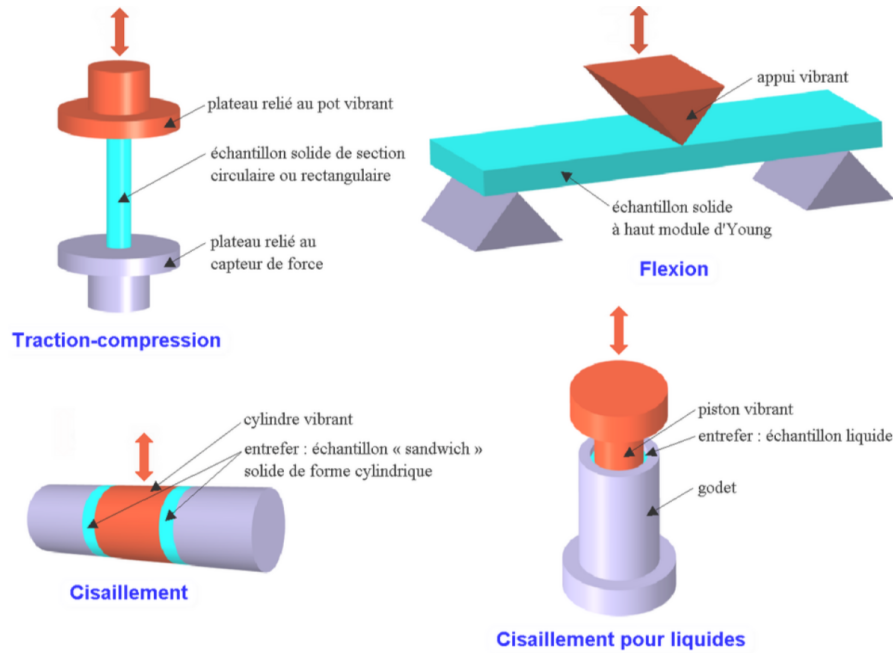


Figure 1: Techniques d'analyses des propriétés mécaniques d'un solide, ref : [1]

En effet, nous nous concentrons dans ce rapport à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différentes rampes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. Car pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service (Ref. [5], p.2 ; Ref. [4], p.2).

Nous étudions dans ce rapport principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (Ref. [4] p.2). La DSC qui en revanche (Differential Scanning Calorimetry) mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique (Ref. [5] pages 2-4).

Ainsi le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en une configuration en trois points pour mesurer les modules viscoélastiques E' , E'' et $\tan \delta$ (décrits postérieurement Sec. ??) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse (transition alpha) Ref. [2] de notre échantillon de PMMA. En un second temps, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques (cristallisation froide, fusion, transition vitreuse, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET Ref. [3].

2 DMA

2.1 description de l'installation et manipulations

Les manipulations sont realisees sur un echantillon de PMMA. Nous utlisons donc la technique de DMA grace a la machine "X'Press DMA 242 E Artemis" du fournisseur NETZSH Ref. ?? qui nous permet d'evaluer les proprietes viscoelastiques de notre echantillon de PMMA. Pour ce faire, nous lui appliquons une charge oscillante pendant que ce dernier se trouve dans le four lui imposant une rampe thermique positive. Nous repetons ce processus a differentes frequences d'oscillations de la charge, soit a 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz et 20Hz. La rampe thermique reste identique pour chaque serie de mesure. (PRECISER VITESSE)

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs parametres visibles sur Fig. 2. La charge genere une deformation totale, visqueuse et elastique. Couples a la contrainte correspondante, nous pouvons determiner l'etat dans lequel se trouve l'echantillon au cours de l'experience.

La figure 2 nous permet de determiner par le sommet de la deformation totale E'' , le sommet de la deformation elastique E' et leur dephasage δ (voir ??).

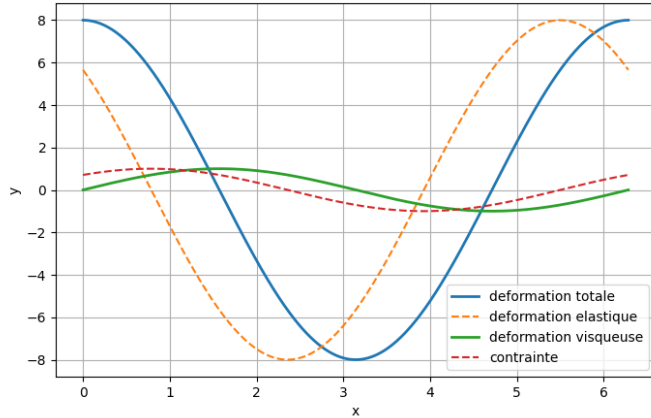


Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilite des resultats, il faut faire attention a relever precisement les dimensions de l'echantillon mesure avant de le placer dans le four. Une fois dedans, il est necessaire de configurer l'offset entre l'echantillon et la masse oscillante. En effet, afin de modeliser correctement les parametres recherches sur Fig. 2, il est indispensable de rentrer les bon parametres dans les fonctions qui vont determiner l'ajustement des donnees obtenues pendant le process. Cela s'illustre par les Eqs. 3 et 2.2 en Sec. ??.

2.2 Theorie

A partir de Ref. [4], nous pouvons decire depuis les lois de Hook et de Newton la modelisation de notre systeme. L'instrument impose une contrainte périodique en fonction du temps $\sigma(t)$ de pusation ω et d'une contrainte de reference σ_0 tel que

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t). \quad (1)$$

Notons, une deformation ϵ sous dephasage d'un angle δ :

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin(\omega t + \delta). \quad (2)$$

Selon les hypotheses du protocole (Ref. [4] p. 2-3), les grandeurs viscoelastiques mesurees E' (module de stockage) et E'' (module de perte) sont apres derivations des Eqs. 1 et 2

$$E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \cos \delta \quad et \quad E'' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \sin \delta. \quad (3)$$

Elles permettent d'ecire le pic du facteur d'amortissement $\tan \delta$ correspondant à la transition vitreuse mécanique a partir de relations trigonometriques avec Eqs. 3 tel que :

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

. (4)

Comme cette transition depend de la frequence d'excitation, les temperatures des pics mesures sont exploitees à l'aide de la loi d'Arrhenius (voir Ref. [4]) :

$$f = f_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (5)$$

que l'on linéarise sous la forme

$$\ln f = \ln f_0 - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Ainsi, la représentation de $\ln f$ en fonction de $1/T_g(f)$ permet d'extraire l'énergie d'activation E_a associée à la transition vitreuse du PMMA.

2.3 Resultats

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. ?? présente un exemple typique des signaux obtenus traités ensuite plus clairement sur Fig. 3 :

le module de stockage E' en bleu (voir Eq. 3) est relativement élevé à basse température (2000-2500 MPa) et se stabilise généralement vers 200 MPa indépendamment de la fréquence imposée,

Le module de perte E'' en jaune (voir Eq. 3) adopte un comportement similaire au module de stockage, mais il varie autour de 150-200 MPa avant de se stabiliser autour de 20-50 MPa.

Le déphasage entre les deux modules illustre ainsi le facteur d'amortissement $\tan \delta$ en vert (voir Eq. 2.2) dont on observe les pics légendés sur Fig. 3.

La rampe thermique est répétée pour plusieurs fréquences légendées entre 1 Hz et 20 Hz sur Fig. 3, sur le même échantillon de PMMA en configuration "3 point bending" entre 75° et 175°.

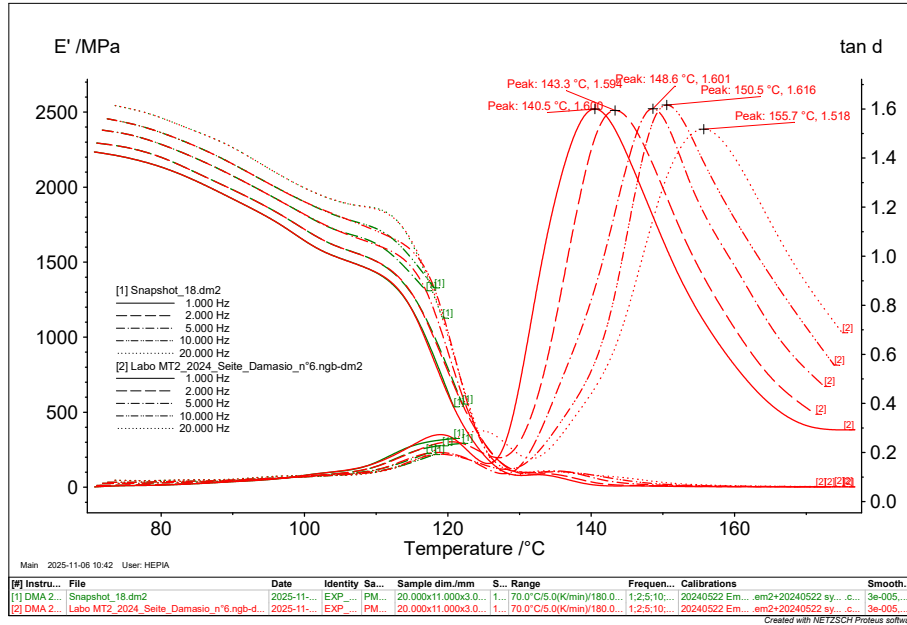


Figure 3: Analyse du pic de $\tan \delta$ permettant l'extraction de $T_g(f)$

Le logiciel d'analyse associée à la machine du fournisseur (voir Sec. 2), a permis d'obtenir un fit des différents sets de données et par recherche des extremas locaux les pics de températures auxquels le $\tan \delta$ correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 2.4).

2.4 Analyse des résultats, complement

Grace au traitement de donnees sur Fig. ??, nous pouvons obtenir en couplant les extremums a chaque frequence d'oscillation imposee a la masse le tableau suivant :

Frequence [Hz]	Peak [°]	incertitude [°]
1.000	140.5	1.606
2.000	143.5	1.594
5.000	148.6	1.601
10.000	150.5	1.616
20.000	155.7	1.518
Moyenne	n/a	1.587

Table I: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extremums locaux de Fig. 3 que l'on peut retrouver dans le tableau I. Grace a la relation Eq. 5 qu'on linearise tel que Eq. 6, nous obtenons le graph d'Arrhenius suivant :

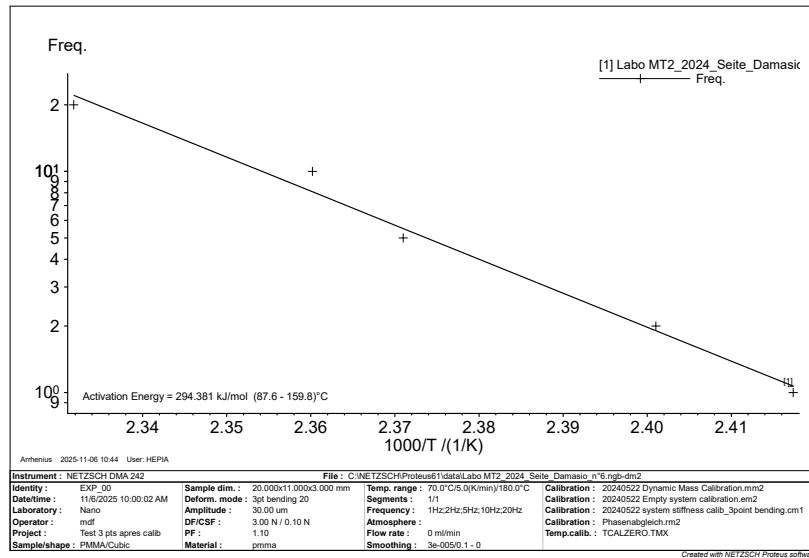


Figure 4: Arrhenius graph

Celui nous permet, comme nous le mentionnons en Sec. ??, d'extraire l'energie d'activation E_a associee a la transition vitreuse de notre echantillon de PMMA, soit

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} (87.6-159.8^\circ).$$

PRECISER L'IMPRESSION AVEC REGRESSION

3 DSC

3.1 Description des manipulations

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine X'Press DSC 214 Polyma' également du fournisseur NETZSCH. Cet instrument est essentiellement un four. A l'intérieur de ce derniers, se trouvent deux petites capsules visibles sur Fig. 5. L'une accueille l'échantillon, l'autre sert de référence. (Ref. [3]),

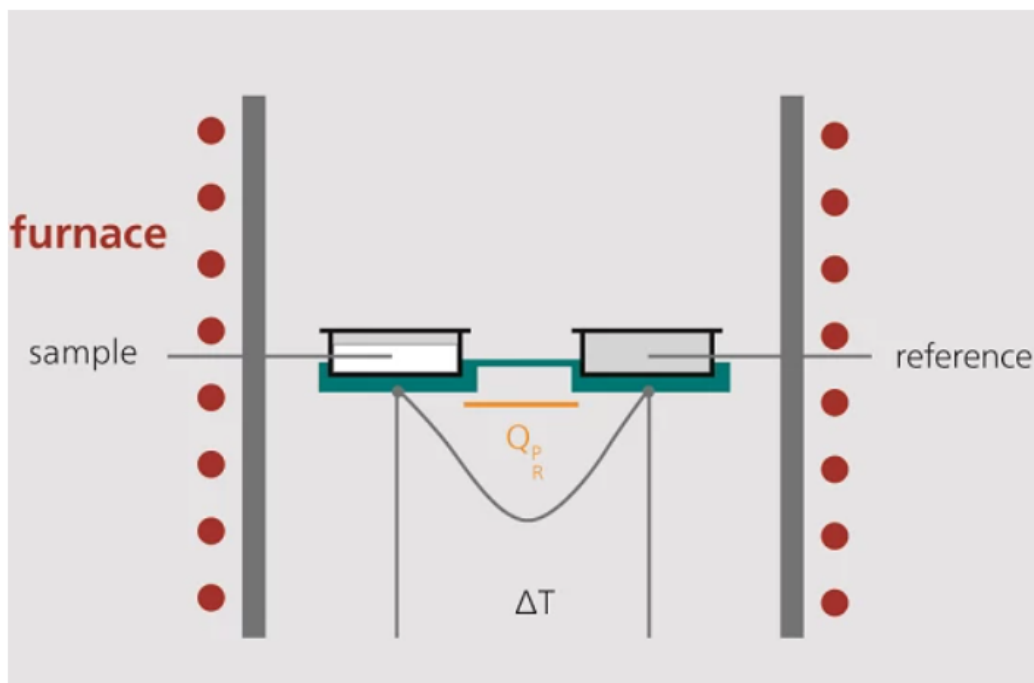


Figure 5: Schema de principe de la mesure DSC, Ref. [3]

L'échantillon doit soigneusement être préparé afin de limiter les erreurs de mesures. Il est important de sceller les capsules par pression après avoir manipulé l'échantillon avec des gants. Cela permet d'éviter de contaminer le PET avec des impuretés, car nos mesures se basent sur les capacités calorifiques propres à notre échantillon. (on part du principe que la capacité calorifique du PET a été maintes fois vérifiée par calorimétrie [?])

Enfin, le principe du DSC consiste à simplement mesurer avec deux thermocouples identiques la chaleur que dégagent chacun des échantillons. Nous soustrayons la différence entre les deux afin d'obtenir l'évolution de ce paramètre en fonction de la température du four. En appliquant cette mesure à différentes rampes thermiques (voir vitesses Tab. II), nous pouvons vérifier graphiquement la température de transition vitreuse T_g (ou transition alpha), la température de fusion T_f . L'expérience permet également d'identifier les phases où se forment et déforment les cristaux dans un échantillon de PET en fonction de différentes rampes thermiques. Nous employons l'ordre suivant : d'abord chauffer rapidement l'échantillon, puis le refroidir rapidement. Ensuite il faut procéder à une chauffe lente puis un refroidissement lent.

3.2 Resultats

Lors de la chauffe rapide Fig. 6, nous constatons une temperature de transition vitreuse autour de 82 °C et pic exothermique vers 244.8°C d'une intensite de $-43.15 \pm 0.00 J/g$. En effet, chauffe a froid, les cristaux qui se defonts liberent une certaine chaleur. En revanche, le refroidissement rapide a chaud sur Fig. 7 ne laisse pas au materiel le temps de correctement se restructurer et prend une structure amorphe.

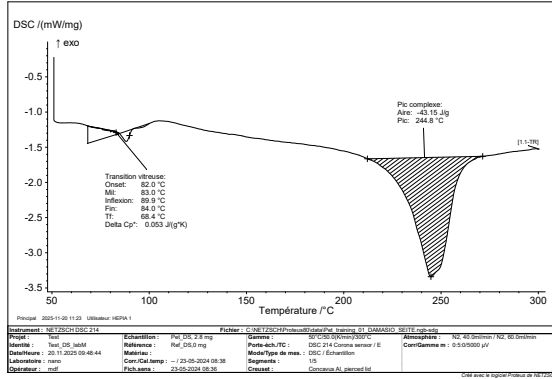


Figure 6: $\delta H(T[°C])$ chauffe rapide

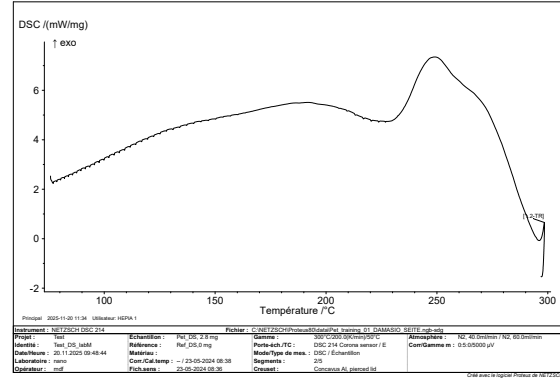


Figure 7: $\delta H(T[°C])$ refroidissement rapide

Par la suite, le comportement de l'échantillon change lorsque nous lui permettons de se refroidir ou chauffer plus lentement (visible sur Figs. 8 et 9).

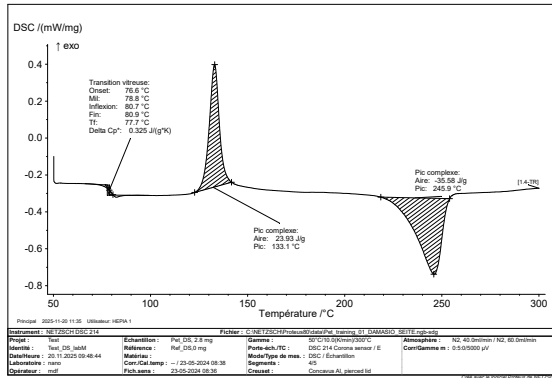


Figure 8: $\delta H(T[°C])$ chauffe lente

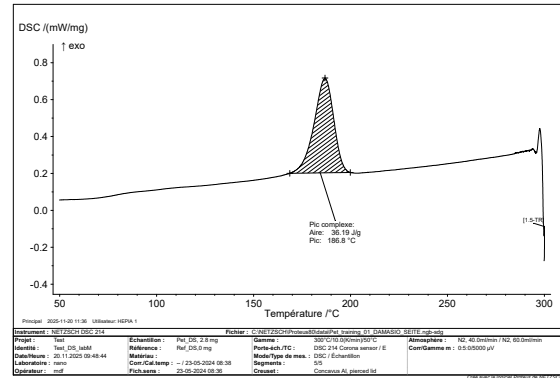


Figure 9: $\delta H(T[°C])$ refroidissement lent

Après un refroidissement rapide sur Fig. 7, nous chauffons lentement et obtenons Fig. 8 sur laquelle T_g se situe autour de 77°C, soit environ 5° plus bas que lors de la première chauffe sur Fig. 6. Nous observons ensuite un pic endothermique sur Fig. 8 autour de 131 °C que nous ne voyons pas sur Fig. 6. Cela démontre l'énergie de recristallisation du matériau. Autour de 245 °C, avec 0.2°C de différence de Fig. 6, nous observons un second pic sur Fig. 8, qui est également de nature exothermique comme. Cela démontre l'énergie libérée lors de la decristalisation dans l'échantillon de PMMA. Lors du refroidissement lent sur Fig. 9, nous observons contrairement que sur Fig. 7 un pic endothermique démontrant l'énergie nécessaire à la recristallisation du matériau.

3.3 Analyse

Dans son ensemble chaque experience en DSC est visible en Tab. II. DETERMINER TAUX DE CRISTALINITE !!!

Figure	V_{vt} [K/min]	Pic complexe [$^{\circ}$]	Aire [J/g]	T_v [bool]
6	50.0	244.8	-43.15	Oui
7	-200.0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
8	10.0	131.1-245.9	23.93-(-35.58)	Oui
9	-10.0	186.8	36.19	$\emptyset$

Table II: V_{vt} : vitesse de la variation thermique, T_v : Transition vitreuse

Avec la chauffe rapide en vert sapin, le refroidissement rapide en rouge, la chauffe lente en jaune et le refroidissement lent en violet (voir Fig. ??)...

Que l'on peut resumer dans le tableau chronologique comparatif suivant :

Condition (C—R)	Cristallisation froide ?	Fusion	Cristallisation chaude ?	Cristallinite
C rapide	??	??	??	??
R rapide	??	??	??	??
C lent	??	??	??	??
R lent	??	??	??	??

Table III: tableau comparatif des mesures DSC

4 Conclusion

Conclusions DMA : Nous avons pu déterminer l'énergie d'activation telle que :

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} \text{ (87.6-159.8}^\circ\text{)}.$$

Elle illustre ce qu'il faut comme énergie aux chaînes de polymères pour s'organiser. Développer...

Conclusions DSC :

References

- [1] Selon, *analyse mécanique dynamique*,
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique
Consulté le 1 Décembre 2025
Extrait de :

- Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Ménotech : génie des matériaux*, Paris, Éditions Eyrolles, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>
Consulté le 1 Décembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>
Consulté le 1 Décembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DMA*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DSC v2024.pdf Labo MT2 - DSC v2024.pdf

5 Annexes

5.1 Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC

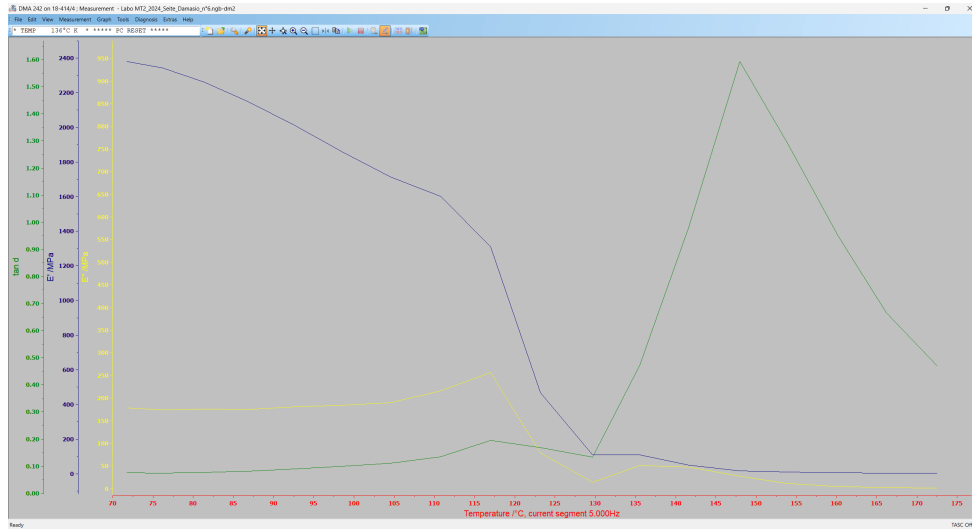


Figure 10: le graph primitif

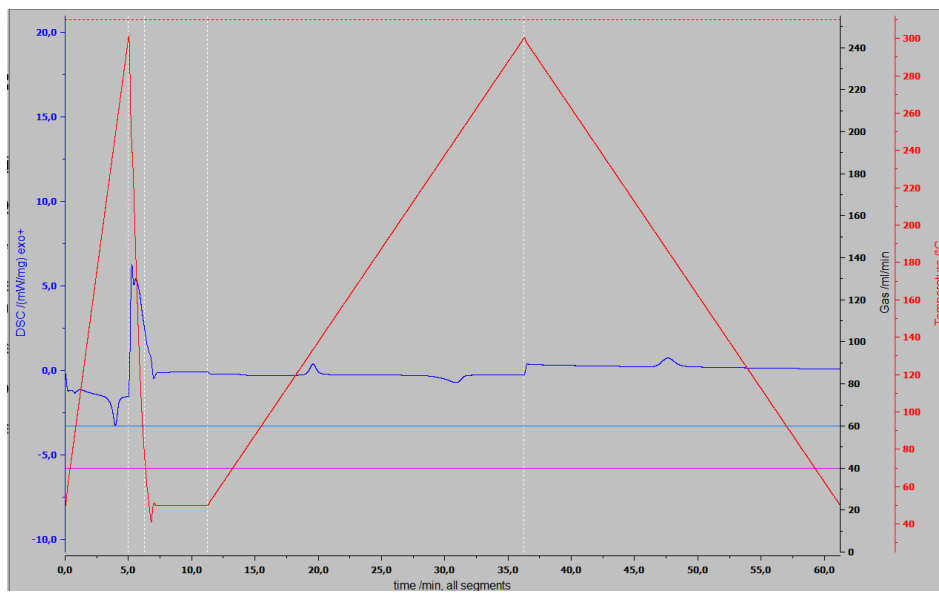


Figure 11: donees brutes