

# Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 4, 2025

## Abstract

Ce travail a permis grâce à la DMA d'extraire les paramètres  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  dont le pic caractéristique évolue en fonction de la fréquence appliquée à l'échantillon. Cette méthode nous a permis de trouver la valeur de ... pour l'énergie d'activation. Grâce à la DSC, nous avons déterminé les températures de cristallisation et de fusion dans différents régimes thermiques d'un échantillon de PET. (PS. veuillez excuser tous les accents absents...)

## Contents

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Description de l'installation et manipulations</b> | <b>3</b>  |
| 2.1      | Expérience 1, DMA . . . . .                           | 3         |
| <b>3</b> | <b>Résultats</b>                                      | <b>4</b>  |
| 3.1      | Expérience 1 : Résultats DMA . . . . .                | 4         |
| <b>4</b> | <b>Analyse des résultats, complément</b>              | <b>5</b>  |
| 4.1      | DMA . . . . .                                         | 5         |
| 4.2      | Expérience 2, DSC . . . . .                           | 6         |
| 4.3      | Expérience 2 : Résultats DSC . . . . .                | 7         |
| 4.4      | DSC . . . . .                                         | 8         |
| <b>5</b> | <b>Conclusion</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>Annexes</b>                                        | <b>10</b> |
| 6.1      | Annexe A : DMA data . . . . .                         | 10        |
| 6.2      | Annexe B : DSC data . . . . .                         | 10        |

# 1 Introduction

Il existe plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1). Dans notre cas, c'est par la flexion que nous analysons un echantillon de PMMA pour une premiere exeperience.

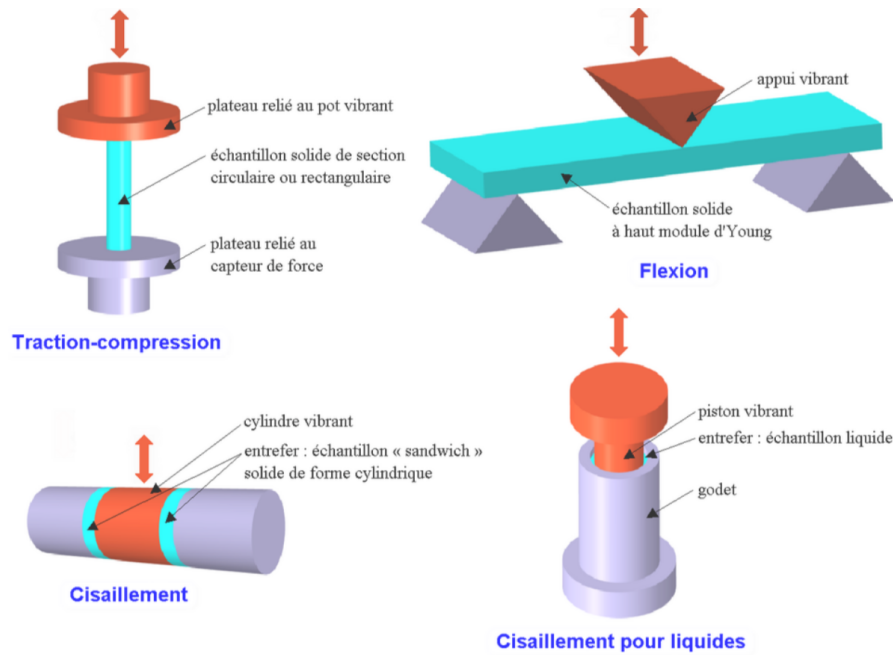


Figure 1: Techniques d'analyses des propriétés mécaniques d'un solide, ref : [1]

En effet, nous nous concentrons dans ce rapport à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différentes rampes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. Car pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service (Ref. [5], p.2 ; Ref. [4], p.2).

Nous étudions dans ce rapport principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (Ref. [4] p.2). La DSC qui en revanche (Differential Scanning Calorimetry) mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique (Ref. [5] pages 2-4).

Ainsi le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en une configuration en trois points pour mesurer les modules viscoélastiques  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  (décrits postérieurement Sec. ??) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse (transition alpha) Ref. [2] de notre échantillon de PMMA. En un second temps, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques (cristallisation froide, fusion, transition vitreuse, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET Ref. [3].

## 2 Description de l'installation et manipulations

### 2.1 Experience 1, DMA

Les manipulations sont realisees sur un echantillon de PMMA (donner formule brute ?), nous utlisons donc la technique de DMA grace a la machine "X'Press DMA 242 E Artemis" du fournisseur NETZSH qui selon lui doit nous permettre d'evaluer les proprietes viscoelastiques de notre echantillon en lui appliquant une charge oscillante Ref. [2].

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs parametres visibles sur Fig. 2. La charge genere une deformation totale, visqueuse et elastique. Couples a la contrainte correspondante, nous pouvons determiner l'etat dans lequel se trouve l'echantillon au cours de l'experience.

La figure ci-contre nous permet de determiner par le sommet de la deformation totale  $E''$ , le sommet de la deformation elastique  $E'$  et leur dephasage  $\delta$  (voir ??).

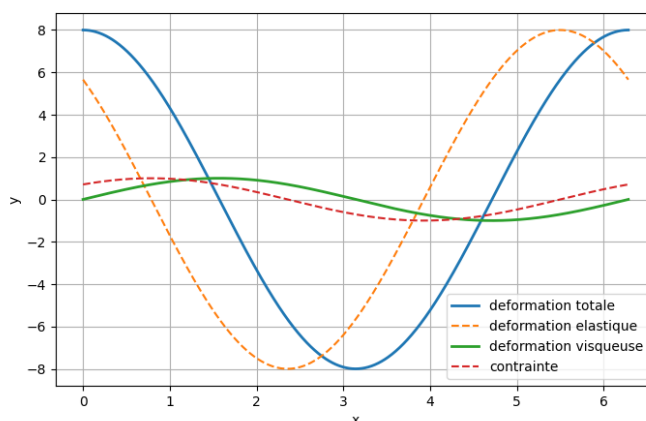


Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilite des resultats, il faudra suivre les instructions logicielles/machines du fournisseur Ref. [2] ou suivre des protocoles adaptes tel que Ref. [4].

DECRIRE PLUS ?

## 3 Résultats

### 3.1 Expérience 1 : Resultats DMA

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. 3 présente un exemple typique des signaux obtenus : le module de stockage  $E'$  (en bleu), le module de perte  $E''$  (en jaune) ainsi que le facteur d'amortissement  $\tan \delta$  (en vert), mesurés lors d'une montée en température entre 70 °C et 175 °C.

Le protocole est répété pour plusieurs fréquences, comprises entre 1 Hz et 20 Hz, sur des échantillons de PMMA en configuration de flexion en trois points. Pour chaque fréquence, nous obtenons les courbes de  $E'$  et de  $\tan \delta$  en fonction de la température. Ces résultats comparatifs sont illustrés en Fig. 4 sur lequel nous retrouvons bien les différentes courbes du format brut précédent Fig. 3.

Le logiciel d'analyse associée à la machine du fournisseur (voir Sec. 2), a permis d'obtenir un fit des différents sets de données et par recherche des extremas locaux les pics de températures auxquels le  $\tan \delta$  correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 4).



Figure 3: Exemple de données brutes issues de la mesure DMA

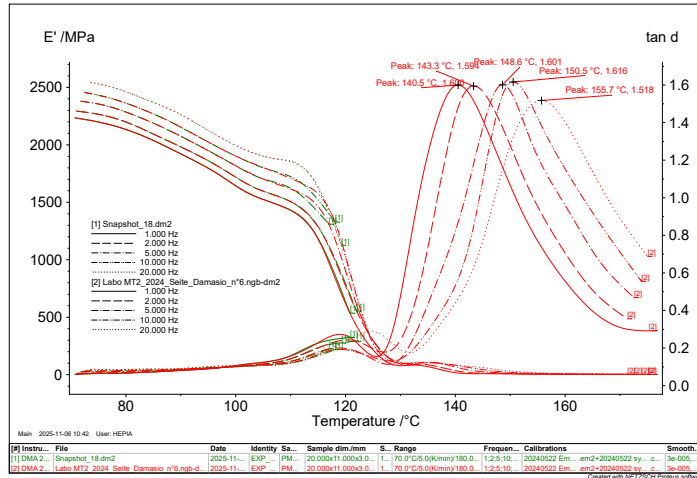


Figure 4: Analyse du pic de  $\tan \delta$  permettant l'extraction de  $T_g(f)$

## 4 Analyse des résultats, complement

### 4.1 DMA

Bien que nous aillions traite les donnees en Sec. 3.1, le traitement permet de determiner plus precisement le pic de chacune des courbes en Fig. 4. Couple a une autre fonction logiciel (recherche des extreumns locaux lors de changement de variation d'une fonction continue). Nous obtenons en compilant tous les extremumsle tableau suivant :

| Frequence [Hz] | Peak [°] | incertitude [°] |
|----------------|----------|-----------------|
| 1.000          | 140.5    | 1.606           |
| 2.000          | 143.5    | 1.594           |
| 5.000          | 148.6    | 1.601           |
| 10.000         | 150.5    | 1.616           |
| 20.000         | 155.7    | 1.518           |

Table 1: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extremums locaux de Fig. 4 que l'on peut retrouver dans le tableau 1. Grace a la relation Eq. ?? qu'on linearise tel que Eq. ??, nous obtenons le graph d'Arrhenius suivant :

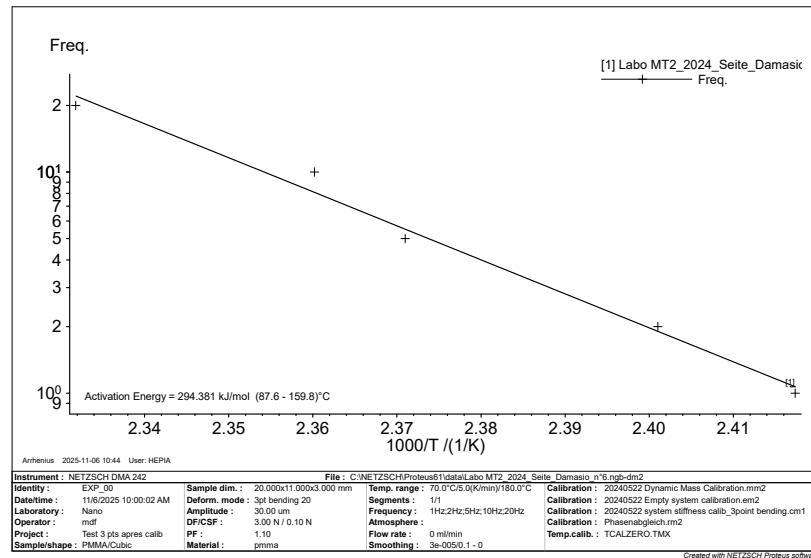


Figure 5: Arrhenius graph

Celui nous permet, comme nous le mentionnons en Sec. ??, d'extraire l'energie d'activation  $E_a$  associee a la transition vitreuse de notre echantillon de PMMA, soit

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} (87.6-159.8^\circ).$$

## 4.2 Experience 2, DSC

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine X'Press DSC 214 Polyma' également du fournisseur NETZSCH qui lui même décrit sa cellule DSC tel que :

"composée d'un four et d'un capteur intégré avec des positions désignées pour les bacs d'échantillonnage et de référence" (Ref. [3]),

que l'on peut voir sur la figure suivante :

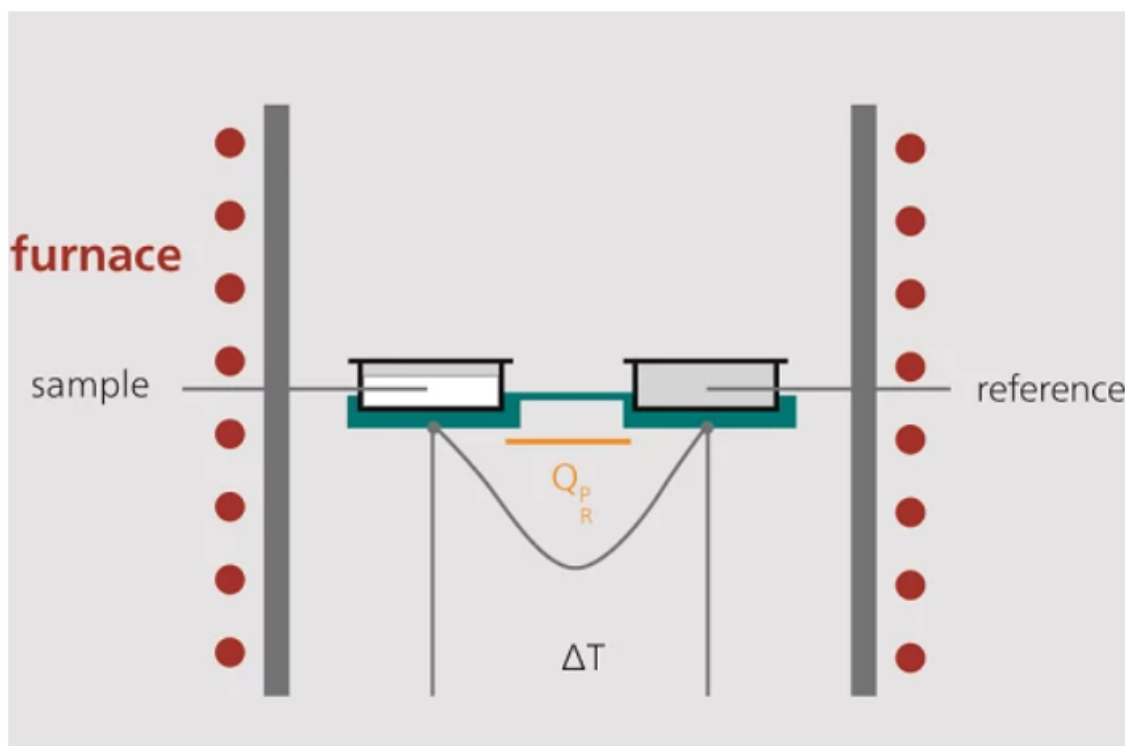


Figure 6: Schéma de principe de la mesure DSC, Ref. [3]

Il est important de sceller les capsules par pression afin d'éliminer le plus d'impuretés après d'avoir découpé en petites rondelles un film plastique en PET et l'avoir déposé dans le lit d'échantillon de la machine (le tout avec des gants évidemment).

Comme pour le DMA, afin de garantir la fiabilité des résultats, chaque élément visible sur le schéma de principe DSC (6), doit être préalablement pesé séparément afin de rentrer les valeurs dans le logiciel. Cela selon les instructions du fournisseur Ref. [3] ou du protocole adapté tel que Ref. [5].

## 4.3 Expérience 2 : Resultats DSC

Lors de la chauffe rapide Fig. 7, nous constatons une température de transition vitreuse autour de 82 °C et pic exo/endo-thermique de -35.58 J/g. (fusion==endo)

En revanche, le refroidissement rapide ne laisse pas au matériau le temps de correctement se restructurer. (qu'est ce que cela implique?)

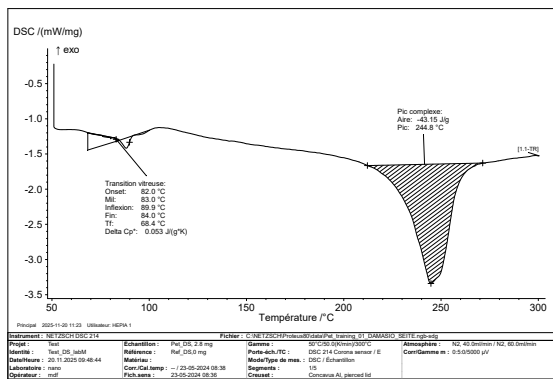


Figure 7:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  chauffe rapide

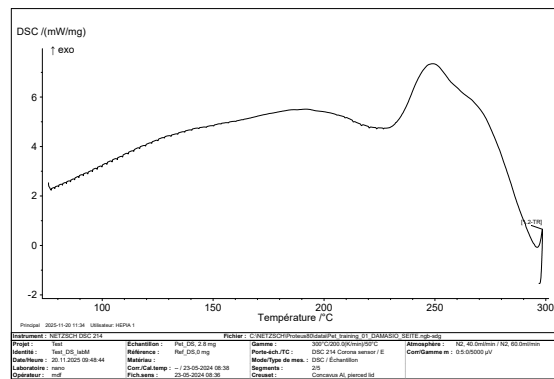


Figure 8:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  refroidissement rapide

Néanmoins, le comportement de l'échantillon change fortement quand nous lui permettons de se refroidir ou chauffer plus lentement (visible sur Figs. 9 et 10).

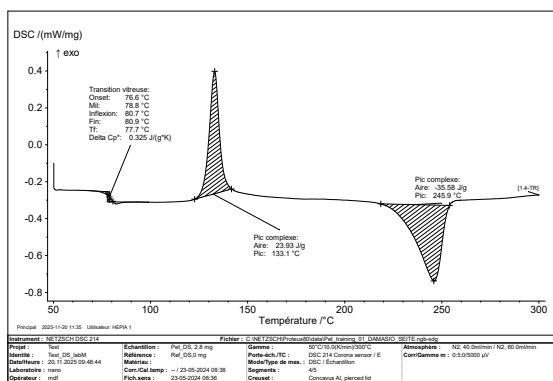


Figure 9:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  chauffe lente

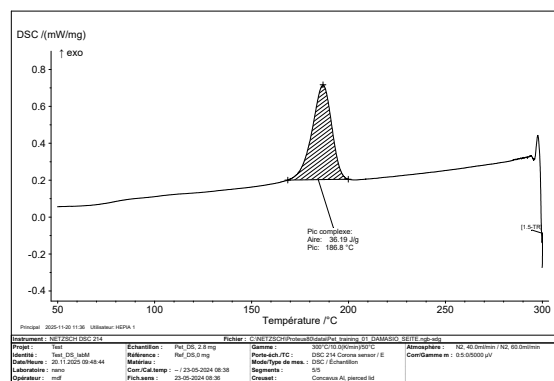


Figure 10:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  refroidissement lent

Quand nous chauffons l'échantillon plus lentement (voir Fig. 9), nous observons sa température de transition vitreuse autour de 77 °C ainsi qu'un pic endothermique vers 133.1 °C et un pic exothermique autour de 250 °C. DEVELOPPER...

Alors que le refroidir plus lentement (voir Fig. 10), nous laisse entrevoir plus clairement un pic. DEVELOPPER...

## 4.4 DSC

Dans son ensemble chaque experience en DSC est visible en Fig. ??.

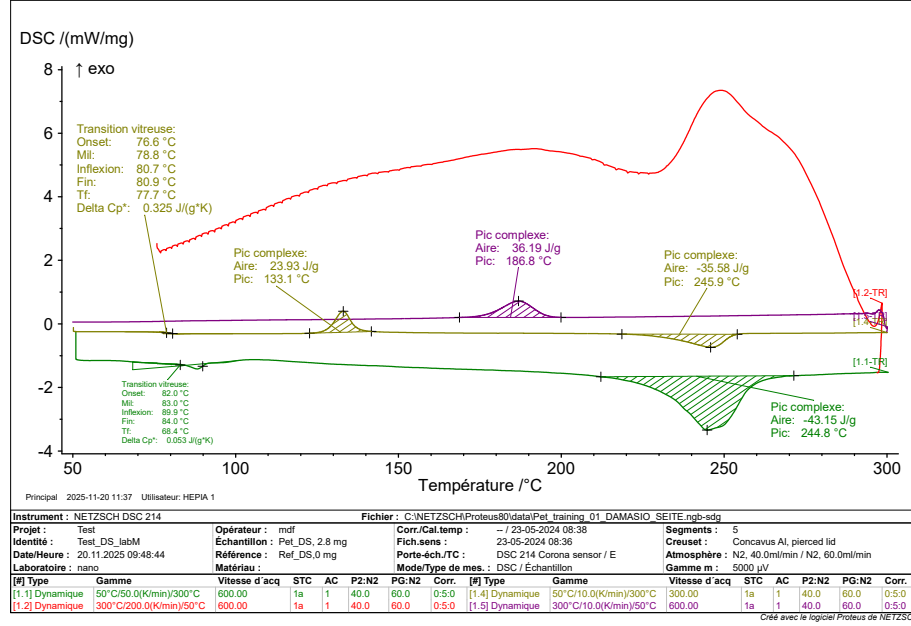


Figure 11: Vue d'ensemble des mesures DSC

Avec la chauffe rapide en vert sapin, le refroidissement rapide en rouge, la chauffe lente en jaune et le refroidissement lent en violet (voir Fig. ??), nous pouvons concentrer les données analysées dans le tableau suivant :

| Variation       | $V_{vt}$ [K/min] | Pic complexe [°] | Aire [J/g]     | $T_v$ [bool] |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Chauffe         | 50.0             | 244.8            | -43.15         | Oui          |
| Refroidissement | -200.0           | ∅                | ∅              | ∅            |
| Chauffe         | 10.0             | 131.1-245.9      | 23.93-(-35.58) | Oui          |
| Refroidissement | -10.0            | 186.8            | 36.19          | ∅            |

Table 2:  $V_{vt}$ : vitesse de la variation thermique,  $T_v$ : Transition vitreuse

Que l'on peut resumer dans le tableau chronologique comparatif suivant :

| Condition (C—R) | Cristallisation froide ? | Fusion | Cristallisation chaude ? | Cristallinité |
|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| C rapide        | ??                       | ??     | ??                       | ??            |
| R rapide        | ??                       | ??     | ??                       | ??            |
| C lent          | ??                       | ??     | ??                       | ??            |
| R lent          | ??                       | ??     | ??                       | ??            |

Table 3: tableau comparatif des mesures DSC



## 5 Conclusion

Conclusions DMA : Nous avons pu déterminer l'énergie d'activation telle que :

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} (87.6-159.8^\circ).$$

Elle illustre ce qu'il faut comme énergie aux chaînes de polymères pour s'organiser. Développer...

Conclusions DSC :

## References

- [1] Selon, *analyse mécanique dynamique*,  
[https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse\\_mécanique\\_dynamique](https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique)  
Consulté le 1 Décembre 2025  
Extrait de :
  
- Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*, Paris, Éditions Eyrolles, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>  
Consulté le 1 Décembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>  
Consulté le 1 Décembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DMA*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DSC v2024.pdf Labo MT2 - DSC v2024.pdf

## 6 Annexes

### 6.1 Annexe A : DMA data



Figure 12: le graph primitif

### 6.2 Annexe B : DSC data

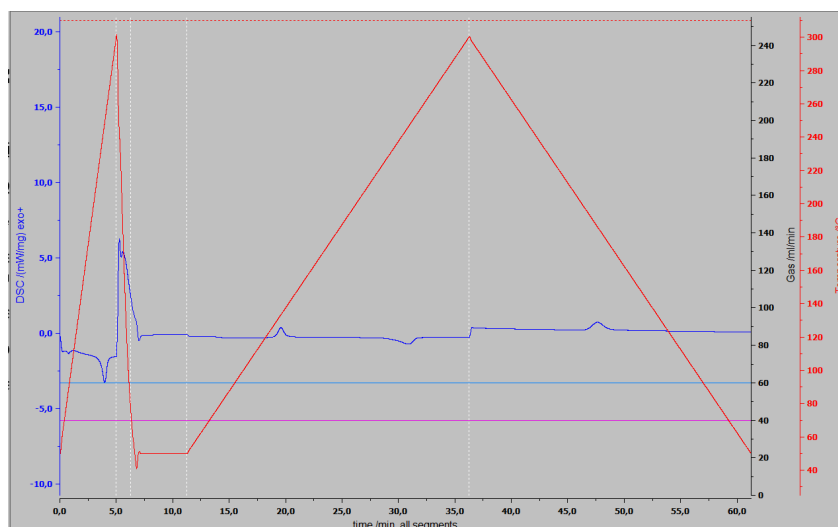


Figure 13: donees brutes